


Uklanjanje

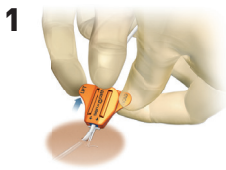

Preklapanje 2A

Moguća sa postavljenim kateterom ili bez katetera

- Palcem i prstom jedne ruke držite krilce HOLD radi stabilizacije i osiguranja uređaja ispod kože
- Kažiprstom druge ruke, rub krilca LIFT podignite prema gore sa palcem postavljenim u sredini kako bi uklonili poklopac sa baze
- Uklonite kateter
- Pritisnite mjesto umetanja SecurAcath-a radi postizanja hemostaze




- Snažno pritisnite mjesto umetanja kako bi tkivo ostalo nepomično
- Preklopite krilca prema dolje kako biste spojili stopala ispod kože




- Preklopljenu bazu držite u vodoravnom položaju sa kožom
- Slijedeći oblik stopala, ukloniti Securacath brzim, opreznim pokretom prema gore

Razdvajanje 2B

Kateter se najprije mora ukloniti

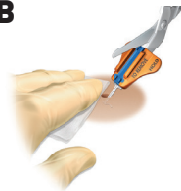

- Potpuno prerežite bazu na pola po dužini utora koristeći škare sa tupim vrhom
- Nožice SecurAcath-a oblikovana su kao "L" sa stopalima koja se protežu 5mm sa svake strane na mjestu umetanja

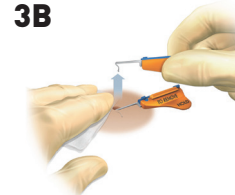

- Snažno pritisnite mjesto umetanja kako bi tkivo ostalo nepomično
- Zaokrenite plavi rub prema gore te brzim, opreznim pokretom prema gore uklonite svaku nožicu zasebno slijedeći oblik stopala

SecurAcath®

For the Life of the Line



Kontakt u bolnici:

Kontakt telefon:

Kompletne informacije i instrukcije za upotrebu mogu se pronaći na www.securacath.com.



Preuzmite
SecurAcath® app




Informacije za pacijenta Vodič za njegu i održavanje

Vaš kateter je osiguran sa SecurAcath® subkutano dizajniranim uređajem za stabilizaciju.

O SecurAcath proizvodu:


- SecurAcath ima mala, tupa, fleksibilno osiguravajuća stopala koja se postavljaju ispod kože s ciljem stabilizacije katetera točno na mjestu ulaska katetera u tijelo
- SecurAcath je dizajniran da osigura kateter za cijelo vrijeme trajanja terapije, eliminira pomicanje ili ispadanje katetera i sprječava prekid terapije
- Ne uklanjajte SecurAcath
- SecurAcath ne treba mijenjati. Smatrajte ga dijelom katetera
- Možete napraviti MR sa postavljenim SecurAcath-om
- SecurAcath će se ukloniti kada se ukloni kateter

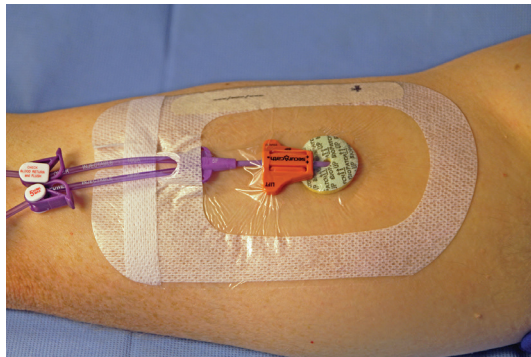

Njega i održavanje

- Slijedite lokalne/bolničke protokole
- SecurAcath se može nježno podignuti od kože kako bi se omogućilo čišćenje u svih 360 stupnjeva oko mjesta uvođenja katetera
- Nemojte uvijati niti okretati uređaj SecurAcath iz njegovog izvornog položaja tijekom postupka čišćenja
- Polupropusnu prozirnu prekrivku postavite labavije. Ako se prekrivka previše zategne može izazvati nelagodu.

- Prozirna prekrivka trebala bi pokriti mjesto umetanja, SecurAcath i kateter do šavnih krilaca. Samo nastavci katetera trebaju biti izvan prekrivke kako bi se spriječilo povlačenje ili knikanje katetera.

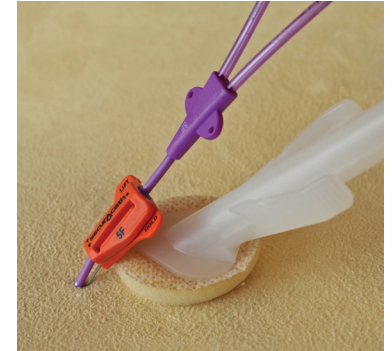

- Ako postoji bilo kakva bol na mjestu umetanja, pokušajte promijeniti prekrivku. Pazite da SecurAcath leži ravno na koži te da se nije pomaknuo s izvornog položaja. Zamijenite prozirnu prekrivku, pazeći da nije previše zategnuta.